

BAFRY-ES

ENVIRONMENT SOLUTIONS

info@bafry.net



BAFRY ENVIRONMENTAL SOLUTION

Medical Field Catalogue

ADVANCED DISINFECTION & HYGIENE SOLUTIONS

German Technology | Scientifically Driven | Globally Certified



ABOUT US

A leading Egypt-German company specializing in hygiene and disinfectant solutions.

Committed to cleanliness, safety, and innovation, we offer high-quality products designed to protect personal and public health.

Since 1997, **BAFRY** GmbH has established itself as a trusted authority in environmental solutions.

Our range of disinfectants and advanced hygiene solutions is designed to the highest international quality standards, ensuring effective protection against harmful bacteria, viruses, and germs.



WHO ARE WE ?

OUR VISION

A leader in environmental solutions, we offer a wide range of products designed to meet the needs of unique applications, leaving a lasting impact on a cleaner, safer environment.

OUR MISSION

To create a microbe-free world and raise environmental health standards through innovative solutions tailored to meet diverse environmental challenges.

OUR COMMITMENT

- Commitment to continuous scientific research, verification, and improvement to ensure long-term reliability for customers and operating environments.
- Maintain the highest standards of quality, safety, and scientific integrity across all operations
- Our disinfectants are food grade, long-acting, broad-spectrum, with long-term efficacy against spores, fungi, bacteria, viruses, algae, and biofilm.
- Eco-Friendly, biodegradable products, with no harm to the environment.



DISINFECTANTS

1) ANTIKEIME

PRODUCT DESCRIPTION



- New generation multipurpose disinfectant, hydrogen peroxide & silver ions.
- Long acting broad spectrum against all microorganisms: bacteria, fungi, viruses, algae, spores and biofilms.
- Nontoxic, non-carcinogenic, non-mutagenic and No need to rinse after use.
- A powerful medical disinfectant for instruments, equipment, units, surfaces and floors in surgery rooms, neonatal incubators, and all clinics, especially dental and gynecology clinics and their contents. It eliminates pathogens and maintains public health in environments requiring strict contamination and infection control.

USAGE INSTRUCTION



- After washing the instruments, soak them in an (ANTIKEIME) disinfectant solution (10-30 ml/liter of water) , contact time (5-10) minutes. Then keep it on cellulose paper without rinsing until dry. Finally, prepare them and transfer them to the sterilizer.
- After washing the endoscopes, soak them in an (ANTIKEIME) solution (10-30 ml/liter of water) , contact time (5-10) minutes , then keep it on cellulose paper without rinsing until completely dry.
- Disinfect surfaces, equipment and dental units with (ANTIKEIME) solution (10-30 ml/liter of water) , contact time (1-10) minutes
- The suction lines of dental chair are disinfected using (ANTIKEIME) solution (10–30 ml/liter of water). The solution is sucked through both the high and low suction connections. A portion of the solution is also placed in the unit's spittoon. contact time 30 minutes, then the solution is drained from the suction lines. No rinsing is required.
- The water in the dental chair's reserve tank is disinfected using (ANTIKEIME) solution at a concentration of (0.5 ml/liter of water).
- The water in the facility's main feed tank is disinfected using (ANTIKEIME) solution at a concentration of (60–300 ml/cubic meter of water).



2) D-CLOUD

PRODUCT DESCRIPTION



- New innovation nanotechnology disinfectant, Quaternary ammonium compound & Branched alcohol.
- Strong against bacteria, fungi, viruses, algae and spores.
- nontoxic, non-carcinogenic and non-mutagenic and No need to rinse after use.
- A powerful medical disinfectant for instruments, equipment, units, surfaces and floors in surgery rooms, neonatal incubators, and all clinics, especially dental and gynecology clinics and their contents. It eliminates pathogens and maintains public health in environments requiring strict contamination control and infection control.

USAGE INSTRUCTION



- After washing the instruments, soak them in an (D-CLOUD) disinfectant solution (10-30 ml/liter of water), contact time (5-10) minutes. then rinsed well and keep it on cellulose paper until they are completely dry. Finally, prepare them and transfer them to the sterilizer.
- After washing the endoscopes, soak them in an (D-CLOUD) solution (10-30 ml/liter of water), contact time (5-10) minutes , then rinsed well and keep it on cellulose paper until they are completely dry.
- The suction lines of dental chair are disinfected using (D-CLOUD) solution (10–30 ml/liter of water). The solution is sucked through both the high and low suction connections. A portion of the solution is also placed in the unit's spittoon. contact time (5-10) minutes , then the solution is drained from the suction lines. then rinsed well.



PRE-DISINFECTANTS

PD-L

PRODUCT DESCRIPTION



- Alkaline pre-disinfectant that prevents infection transmission, provides effective cleaning, and prevents blood clotting and drying of medical instruments during transport and cleaning. It is also effective with human secretions such as carbohydrates, mucus, lipids, and proteins.

USAGE INSTRUCTION



- After the instruments are used, they are placed in a (PD-L) solution with a concentration of (2%) (20 ml solution / 980 ml water) to prevent the instruments from drying out and the blood clotting, then they are left in the solution during their transfer from operating rooms and clinics to the sterilization room to prevent the spread of infection during transfer.
- Keep the instruments in the solution, contact time 10 minutes and cleaned with a brush to remove any debris. then rinsed well.
- The suction lines are cleaned using (PD-L) solution at a concentration of (3%) (30 ml/970 ml water). The solution is sucked through both the high and low suction connections. A portion of the solution is also placed in the unit's spittoon. contact time 10 minutes, then rinsed well.



REMOVERS

SMC

PRODUCT DESCRIPTION



- A strong several complex substances antirust, corrosion inhibitor
- Specialized in removing rust and scales, to maintain the shine of tools and protect them from corrosion.

USAGE INSTRUCTION



- Diluted (5%) (50 ml/950 ml water).
- Keep tools from which rust and salts are to be removed for a contact time 30 minutes.
- Clean the tools with a brush.
- Rinse the tools thoroughly with water and place them on cellulose paper to dry completely.



HAND CARE

1) HAND SANITIZER LIQUID



PRODUCT DESCRIPTION

- A powerful, ready to use hand Sanitizer liquid with two types of sanitizers & skin moisturizer.
- Effective, broad spectrum against all kinds of microbes, fungi's, bacteria, viruses.
- A major hand sanitizer liquid for maintain personal hygiene and Preserves from infection and contagion.



USAGE INSTRUCTION

- Dispense sufficient amount (about 2 ml) into your hands.
- Rub your hands together, cover all surfaces of your hands (palms, back of hands, between your fingers, under nails).
- Let sanitizer to dry completely, don't wipe or rinse your hands.



2) HAND SANITIZER GEL

PRODUCT DESCRIPTION



- A powerful, ready to use hand Sanitizer gel with two types of sanitizers & skin moisturizer.
- Effective, broad spectrum against all kinds of microbes, fungi's, bacteria, viruses.
- A major hand sanitizer gel for maintain personal hygiene and Preserves from infection and contagion.

USAGE INSTRUCTION



- Dispense sufficient amount (about 2 ml) into your hands.
- Rub your hands together, cover all surfaces of your hands (palms, back of hands, between your fingers, under nails).
- Let sanitizer to dry completely, don't wipe or rinse your hands.



3) ANTIBACTERIAL HAND SOAP



PRODUCT DESCRIPTION

- A ready to use hand soap for cleaning, sanitation and moisturizing, Gentle on the skin.
- Effective cleaner & sanitizer against all kinds of microbes, fungi's, bacteria, viruses. Preserves from infection and contagion.
- Keep hands clean, protected for a long period at least 24 hours.



USAGE INSTRUCTION

- Wet your hands with clean & running water (warm or cold).
- Dispense sufficient amount (about 2 ml) into your hands, rub your hands together, cover all surfaces of your hands (palms, back of hands, between your fingers, under nails).
- Rinse your hands with water, dry your hands with a clean towel or air dryer.



4) HAND SOAP

PRODUCT DESCRIPTION



- A ready to use hand soap for cleaning, moisturizing Gentle on the skin.
- Effective cleansing soap for removing strong dirtiness (oils, grease, fats, proteins).
- Keep hands clean, protected for a long period at least 24 hours.

USAGE INSTRUCTION



- Wet your hands with clean & running water (warm or cold).
- Dispense sufficient amount (about 2 ml) into your hands, rub your hands together, cover all surfaces of your hands (palms, back of hands, between your fingers, under nails).
- Rinse your hands with water, dry your hands with a clean towel or air dryer.



5) HAND SOAP (MULTI- PERFUME)

PRODUCT DESCRIPTION

- A ready to use hand soap multi-perfume for cleaning and moisturizing.
- Effective cleansing soap for removing strong dirtiness (oils, grease, fats, proteins) that keep hands with a distinctive and refreshing fragrance that lasts for a long time to eliminate un pleasant smells.

USAGE INSTRUCTION

- Wet your hands with clean & running water (warm or cold).
- Dispense sufficient amount (about 2 ml) into your hands, rub your hands together, cover all surfaces of your hands (palms, back of hands, between your fingers, under nails).
- Rinse your hands with water, dry your hands with a clean towel or air dryer.



6) HAND FOAM (MULTI- PERFUME)



PRODUCT DESCRIPTION

- A ready to use hand foam with multi-perfume for cleaning and moisturizing.
- Effective cleansing foam for removing strong dirtiness (oils, grease, fats, proteins) that keep hands with a distinctive and refreshing fragrance that lasts for a long time to eliminate unpleasant smells.



USAGE INSTRUCTION

- Wet your hands with clean & running water (warm or cold).
- Dispense sufficient amount into your hands.
- Rub your hands together, cover all surfaces of your hands (palms, back of hands, between your fingers, under nails).
- Rinse your hands with water, dry your hands with a clean towel or air dryer.



DETERGENTS

1) DT-N PLUS

PRODUCT DESCRIPTION



- A Strong neutral cleaner and disinfectant, low foaming detergent, multi-scented. Contains a safe, organic alkaline and is phosphate-free, Suitable for all floors, walls and toilets.
- Perfect protection from germs, microbes and bacteria.
- Leaves floors shiny and protected.
- Long-lasting fragrance.

USAGE INSTRUCTION



- For daily cleaning of floors and walls, add one part of detergent to every 30 parts water.
- For bathrooms, sinks, and drains, add one part detergent to 20 parts water.



2) DT-C

PRODUCT DESCRIPTION



- A Strong acidic cleaner, medium foaming, contains a safe, organic acid and is phosphate-free, Suitable for all floors and walls.
- A Major cleaner to remove salt deposits, scales on floors and walls.

USAGE INSTRUCTION



- Diluted 30 – 50 ml / liter of water.
- Leave on the surface to be cleaned for at least 10 minutes.
- Scrub the surface using appropriate cleaning tools or high-pressure water.
- Rinse the surface thoroughly with water.

REGISTRATION

BAUA: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr: N-58429

Federal Institute For Occupational Safety and Health

المعهد الاتحادي الالمانى للسلامة والصحة

BFR: Bundesamt für Risikobewertung

Nr: 4638456

Federal Office For Risk Assessment

المعهد الاتحادي الالمانى لتقييم المخاطر والسموم

UN: United Nations

الامم المتحدة

Nr. 2014

BAFRY-ES

ENVIRONMENT SOLUTIONS

CONTACT US

For technical consultation, regulatory documentation, or partnership inquiries, Bafry's regional teams are available to provide professional support aligned with your operational requirements.

MAIN OFFICE

59 Emtedad Ramsis 2, Front of Conference Center, Nasr City, Cairo, Egypt

SCIENTIFIC OFFICE

Bafry Products Company GmbH
Waldstraße 9
24960 Glücksburg - Germany

BRANCHES

Germany | Egypt | Saudi Arabia | Qatar | Jordan | Lebanon

CONTACTS


info@bafry.net +20 1225017777

info@bafry.net

BAFRY-ES

ENVIRONMENT SOLUTIONS

info@bafry.net

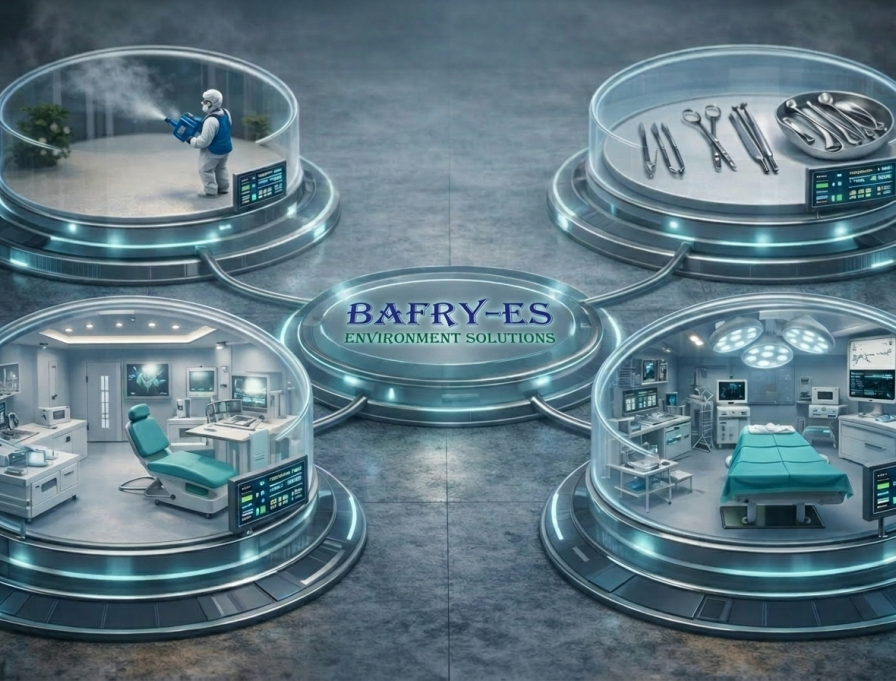

بافري لحلول البيئة مجال القطاع الطبي

حلول متقدمة للتطهير والنظافة

تقنية ألمانية | مدعومة علميًا | معتمدة عالميًا

عن الشركة

شركة مصرية ألمانية رائدة في مجال طول التعقيم والتطهير والتنظيف.

نلتزم بتقديم منتجات مبتكرة وفعالة تهدف إلى حماية الصحة العامة والشخصية.

منذ عام ١٩٩٧ رسخت شركة **بافري** الألمانية مكانتها كمرجع موثوق به في الطول البيئية.

تتضمن مجموعتنا معقمات وطلول تطهير متطورة مصممة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، لضمان فعالية الحماية ضد البكتيريا والفيروسات والجراثيم الضارة.





من نحن ؟

رؤيتنا

لزيادة الحلول البيئية، نقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المصممة لتلبية إحتياجات التطبيقات الخاصة، مما يسهم في تحقيق تأثير دائم نحو بيئة أنظف وأكثر أماناً.

مهمتنا

لخلق عالم خالٍ من الكائنات الدقيقة الضارة ورفع معايير الصحة البيئية من خلال حلول مبتكرة مصممة لمواجهة التحديات البيئية المتنوعة.

إلتزامنا

- الإلتزام بالبحث العلمي المستمر والتحقق والتحسين لضمان موثوقية طويلة الأمد للعملاء وبيئات التشغيل.
- الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة والنزاهة العلمية في جميع العمليات.
- مطهراتنا آمنة غذائياً، طويلة المفعول، واسعة الطيف، توفر حماية فعّالة وطويلة الأمد ضد البكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والطحالب، والأغشية الحيوية
- منتجات صديقة للبيئة، تتحلل حيوياً، ولا تسبب أي ضرر للبيئة.

المطهرات

1) ANTIKEIME

وصف المنتج

- الجيل الأحدث في عالم التطهير، بيروكسيد الهيدروجين وأيونات الفضة.
- ممتد المفعول ومدي طيف واسع يشمل كل الكائنات الحية الدقيقة: البكتيريا، الفطريات، الفيروسات، الطحالب، المتحوصلات والأغشية الحيوية.
- غير سام، غير مسرطن، لا يسبب طفرات جينية ولا يحتاج إلي شطف بعد الإستخدام.
- مطهر طبي قوي للأدوات، المعدات، الوحدات، الأسطح والأرضيات في غرف العمليات، حضانات الرضع، جميع العيادات خاصة عيادات الأسنان والنساء والتوليد بكل محتوياتها. للقضاء علي المسببات المرضية والحفاظ علي الصحة العامة في البيئات التي تتطلب رقابة صارمة علي الملوثات ومكافحة العدوي.

تعليمات الإستخدام

- بعد غسيل الأدوات يتم نقعها في محلول تطهير الأنتيكاييم (10 - 30 ملي / لتر ماء) وتترك لمدة (5 - 10 دقيقة) ثم يتم وضعها علي ورق سليلوز دون شطف حتي تجف ثم يتم تجهيزها ونقلها إلي جهاز التعقيم.
- بعد غسيل المناظير يتم نقعها في محلول تطهير الأنتيكاييم (10 - 30 ملي / لتر ماء) وتترك لمدة (5 - 10 دقيقة) ثم يتم وضعها علي ورق سليلوز دون شطف حتي تجف تماماً.
- تطهير الأسطح والمعدات ووحدات الأسنان بمحلول تطهير (أنتيكاييم) (10 - 30 ملي / لتر ماء) ويترك لمدة (1 - 10 دقيقة).
- تطهير خطوط الشفط لكرسي الأسنان بإستخدام محلول (أنتيكاييم) (10 - 30 ملي / لتر ماء) ويتم شفط المحلول من خلال وصلي الشفط العالي والمنخفض وكذلك نضع بعض المحلول في مبطنة الوحدة وتترك المحلول لمدة (5 - 10 دقيقة) ثم يتم صرف المحلول من داخل خطوط الشفط ولا يحتاج إلي شطف.
- يتم تطهير مياة الخزان الإحتياطي لكرسي الاسنان بإستخدام محلول (أنتيكاييم) بتركيز (0.5 ملي / لتر ماء).
- يتم تطهير مياة خزان التغذية الرئيسي بالمنشأة بإستخدام محلول (أنتيكاييم) بتركيز (60 - 300 ملي / متر مكعب مياة).



2) D-CLOUD

وصف المنتج

- مطهر مستحدث بتقنية نانو رباعيات الأمونيوم والسلاسل الكحولية.
- قوي ومؤثر على جميع الكائنات الحية الدقيقة: البكتيريا، الفطريات، الفيروسات، الطحالب والمتحولات.
- غير سام، غير مسرطن، لا يسبب طفرات جينية.
- مطهر طبي قوي للأدوات، المعدات، الوحدات، الأسطح والأرضيات في غرف العمليات، حضانات الرضع، جميع العيادات خاصة عيادات الأسنان والنساء والتوليد بكل محتوياتها. للقضاء على المسببات المرضية والحفاظ على الصحة العامة في البيئات التي تتطلب رقابة صارمة على الملوثات ومكافحة العدوى.



تعليمات الإستخدام

- بعد غسيل الأدوات يتم نقعها في محلول تطهير (دي-كلاود) (10 - 30 مللي / لتر ماء) وتترك لمدة (5 - 10 دقيقة) ثم يتم شطفها جيداً ووضعها على ورق سيليلوز حتى تجف تماماً ثم يتم تجهيزها ونقلها إلي جهاز التعقيم.
- بعد غسيل المناظير يتم نقعها في محلول تطهير (دي-كلاود) (10 - 30 مللي / لتر ماء) وتترك لمدة (5 - 10 دقيقة) ثم يتم شطفها جيداً ووضعها على ورق سيليلوز حتى تجف تماماً.
- تطهير خطوط الشفط لكرسي الأسنان بإستخدام محلول (دي-كلاود) (10 - 30 مللي / لتر ماء) ويتم شفط المحلول من خلال وصلتي الشفط العالي والمنخفض وكذلك نضع بعض المحلول في مبيضة الوحدة ونترك المحلول لمدة (5 - 10 دقيقة) ثم يتم صرف المحلول من داخل خطوط الشفط ثم يتم شطفها.



ممهّدات التّطهير

ممهّد تطهير قاعدي

PD-L



وصف المنتج

- ممهّد تطهير قاعدي لمنع إنتقال العدوي والتّظيف الفعّال ومنع تجلّط الدم وجفاف الأدوات الطبيّة أثناء النقل والتّظيف كما أنه فعّال مع الإفرازات مثل الكربوهيدرات، المخاط، الدهون، البروتينات.



تعليمات الإستخدام

- بعد إستخدام الأدوات يتم وضعها في محلول (بي دي-إل) بتركيز (2%) (20 مللي محلول / 980 مللي ماء) لمنع جفاف الأدوات وتجلّط الدم وتترك بالمحلول أثناء نقلها من غرف العمليات والعيادات إلي غرفة التعقيم لمنع إنتشار العدوي أثناء النقل.
- تترك الأدوات داخل المحلول لمدة لا تقل عن 10 دقائق ويتم تنظيفها بفرشاة لإزالة أي عوالق عليها ثم يتم شطف الأدوات جيداً بالماء.
- يتم تنظيف خطوط الشفط بإستخدام ممهّد التطهير (بي دي-إل) بتركيز (3%) (30 مللي / 970 مللي ماء) يتم شفط المحلول من خلال وصلتي الشفط العالي والمنخفض وكذلك نضع بعض المحلول في مبصقة الوحدة ثم نترك المحلول لمدة 10 دقائق ثم يتم شطفها.



SMC

مزيل صدأ وأملاح



وصف المنتج

- تركيبة متطورة لإزالة الصدأ والأملاح.
- متخصص لإزالة الصدأ والأملاح، للحفاظ علي لمعة الأدوات وحمايتها من التآكل.



تعليمات الإستخدام

- يخفف بنسبة (5%) (50 مللي / 950 مللي ماء).
- يترك علي الأدوات المراد إزالة الصدأ والأملاح من عليها مدة لا تقل عن 30 دقيقة.
- يتم تنظيف الأدوات بفرشاة.
- يتم شطف الأدوات جيداً بالماء ووضعها علي ورق سيلبوز حتي تجف تماماً.



العناية بالأيدي

1) HAND SANITIZER LIQUID

مطهر أيدي سائل



وصف المنتج

- سائل مطهر ومرطب للأيدي جاهز للإستخدام ، يحتوي على نوعين من المطهرات.
- مدي طيف واسع وفعال يشمل كل الكائنات الحية الدقيقة : الميكروبات، الفطريات، البكتيريا، الفيروسات .
- سائل مطهر متخصص للحفاظ علي النظافة الشخصية للوقاية من العدوي والأمراض.



تعليمات الإستخدام

- ضع كمية مناسبة من المطهر (2 مللي تقريباً)
- افرك يديك معاً بالتركيز علي (راحة اليد، ظهر اليدين، بين الأصابع، تحت الأظافر).
- اترك يديك تجف تماماً ولا تقم بتجفيف أو شطف اليدين بعد التطهير.



2) HAND SANITIZER GEL

مطهر أيدي جل



وصف المنتج

- جل مطهر ومرطب للأيدي جاهز للإستخدام ، يحتوي على نوعين من المطهرات.
- مدي طيف واسع وفعال يشمل كل الكائنات الحية الدقيقة : الميكروبات، الفطريات، البكتيريا، الفيروسات .
- جل مطهر متخصص للحفاظ علي النظافة الشخصية للوقاية من العدوي والأمراض.



تعليمات الإستخدام

- ضع كمية مناسبة من المطهر (2 ملي تقريباً)
- افرك يديك معاً بالتركيز علي (راحة اليد، ظهر اليدين، بين الأصابع، تحت الأظافر).
- اترك يديك تجف تماماً ولا تقم بتجفيف أو شطف اليدين بعد التطهير.



3) ANTIBACTERIAL HAND SOAP صابون أيدي مضاد للبكتيريا



وصف المنتج

- صابون سائل منظف، مطهر ومرطب للأيدي، لطيف على البشرة، جاهز للإستخدام.
- صابون منظف فعال ومطهر مضاد للميكروبات، الفطريات، البكتيريا، الفيروسات، للوقاية من العدوى والأمراض.
- يترك الأيدي نظيفة ومحمية لفترة طويلة 24 ساعة على الأقل.



تعليمات الإستخدام

- بلل يديك بماء جاري نظيف (دافئ أو بارد).
- ضع كمية مناسبة من الصابون (2 مللي تقريباً).
- افرك يديك معاً بالتركيز على (راحة اليد، ظهر اليدين، بين الأصابع، تحت الأظافر).
- اشطف يديك بالماء، جفف يديك بإستخدام منشفة نظيفة أو مجفف الهواء.



4) HAND SOAP

صابون أيدي



وصف المنتج

- صابون سائل منظف ومرطب للأيدي، لطيف على البشرة، جاهز للإستخدام.
- صابون منظف فعال للتخلص من الإلتساخات الصعبة (زيوت، شحوم، دهون، بروتينات).



تعليمات الإستخدام

- بلل يديك بماء جاري نظيف (دافئ أو بارد).
- ضع كمية مناسبة من الصابون (2 مللي تقريباً)
- افرك يديك معاً بالتركيز علي (راحة اليد، ظهر اليدين، بين الأصابع، تحت الأظافر).
- اشطف يديك بالماء، جفف يديك بإستخدام منشفة نظيفة أو مجفف الهواء.



5) HAND SOAP (MULTI- PERFUME)

صابون أيدي (متعدد الروائح)



وصف المنتج

- صابون سائل منظف ومرطب للأيدي متعدد الروائح جاهز للإستخدام.
- صابون منظف فعال للتخلص من الإلتساخات الصعبة (زيوت، شحوم، دهون، بروتينات) يترك الأيدي برائحة عطرية مميزة ومنعشة تدوم لفترة طويلة للقضاء علي الروائح الغير مرغوب فيها.



تعليمات الإستخدام

- بلل يديك بماء جاري نظيف (دافئ او بارد).
- ضع كمية مناسبة من الصابون (2 مللي تقريباً)
- افرك يديك معاً بالتركيز علي (راحة اليد، ظهر اليدين، بين الأصابع، تحت الأظافر).
- اشطف يديك بالماء، جفف يديك بإستخدام منشفة نظيفة أو مجفف الهواء.



6) HAND FOAM (MULTI- PERFUME)

فوم أيدي (متعدد الروائح)



وصف المنتج

- فوم منظف ومرطب للأيدي متعدد الروائح جاهز للإستخدام.
- فوم منظف فعال للتخلص من الإبتساخات الصعبة (زيوت، شحوم، دهون، بروتينات) يترك الأيدي برائحة عطرية مميزة ومنعشة تدوم لفترة طويلة للقضاء على الروائح الغير مرغوب فيها.



تعليمات الإستخدام

- بلل يديك بماء جاري نظيف (دافئ او بارد).
- ضع كمية مناسبة من الفوم علي يديك.
- افرك يديك معًا بالتركيز علي (راحة اليد، ظهر اليدين، بين الأصابع، تحت الأظافر).
- اشطف يديك بالماء، جفف يديك بإستخدام منشفة نظيفة أو مجفف الهواء.



المنظفات

1) DT-N PLUS

منظف ومطهر متعادل (متعدد الروائح)



وصف المنتج

- منظف ومطهر متعادل، قوي، قليل الرغوة، متعدد الروائح، يحتوي على مادة قاعدية عضوية آمنة وخالية من الفوسفات، مناسب لجميع الأرضيات، الحوائط، الحمامات.
- حماية مثالية من الجراثيم والميكروبات والبكتيريا.
- يترك الأرضيات لامعة ومحمية.
- رائحة عطرية تدوم طويلاً.



تعليمات الإستخدام

- التنظيف اليومي للأرضيات والحوائط يضاف مقدار من المنظف لكل 30 مقدار من الماء.
- للحمامات وأحواض الغسيل والبالوعات يضاف مقدار من المنظف لكل 20 مقدار من الماء.



2) DT-C

منظف حامضي



وصف المنتج

- منظف حامضي، قوي، متوسط الرغوة، يحتوي علي مادة حامضيه عضوية آمنة وخالية من الفوسفات. مناسب لجميع الأرضيات والحوائط.
- يستخدم كمنظف لإزالة تكلسات الأملاح، القشور المترسبة علي الأرضيات والحوائط.



تعليمات الإستخدام

- يخفف بنسبة 30 – 50 ملي / لتر ماء.
- يترك علي السطح المراد تنظيفه مدة لا تقل عن 10 دقائق.
- يتم دحك السطح بإستخدام الأدوات الخاصة بالتنظيف أو بإستخدام ضغط ماء عالي.
- يتم شطف السطح جيداً بالماء.

التسجيلات

BAUA: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr: N-58429

Federal Institute For Occupational Safety and Health

المعهد الاتحادي الالمانى للسلامة والصحة

BFR: Bundesamt für Risikobewertung

Nr: 4638456

Federal Office For Risk Assessment

المعهد الاتحادي الالمانى لتقييم المخاطر والسموم

UN: United Nations

الامم المتحدة

Nr. 2014

BAFRY-ES

ENVIRONMENT SOLUTIONS

تواصل معنا

للاستشارات الفنية، أو الوثائق التنظيمية، أو استفسارات الشراكة، فإن فريق بافري الإقليمية متاحة لتقديم دعم مهني يتماشى مع متطلباتكم التشغيلية.

المكتب الرئيسي

٩٥ امتداد رمسيس ٢، أمام قاعة المؤتمرات، مدينة نصر، القاهرة، مصر

المكتب العلمي

شركة بافري للمنتجات - ذات مسؤولية محدودة (GmbH)

Waldstraße ٩

٢٤٩٦٠ غلوكسبورغ - ألمانيا

الفروع

ألمانيا | مصر | السعودية | قطر | الأردن | لبنان

التواصل

info@bafry.net

+٢٠ ١٢٢ ٥٠١ ٧٧٧٧

info@bafry.net